



IPL 840


88588

Návod k použití

OBSAH

1 Bezpečnostní pokyny	3
2 Vedlejší účinky	7
3 Užitečné informace	7
3.1 Rozsah dodávky a balení	7
3.2 Jak IPL840 funguje	8
3.3 Intenzita světla	8
4 Uvedení do provozu	9
4.1 Aplikace světla	9
4.2 Test pokožky	9
4.3 Plán aplikace	10
4.4 Aplikace	10
4.5 Instrukce k použití na obličeji	12
4.6 Péče po aplikaci	12
5 Různé	12
5.1 Čištění a uskladnění	12
5.2 Výměna náplně	12
5.3 Chybové hlášení	13
5.4 Likvidace přístroje	13
5.5 Specifikace	14
6 Záruka	15
6.1 Záruka a záruční opravy	15
6.2 Servis	15

Přístroj a ovládání

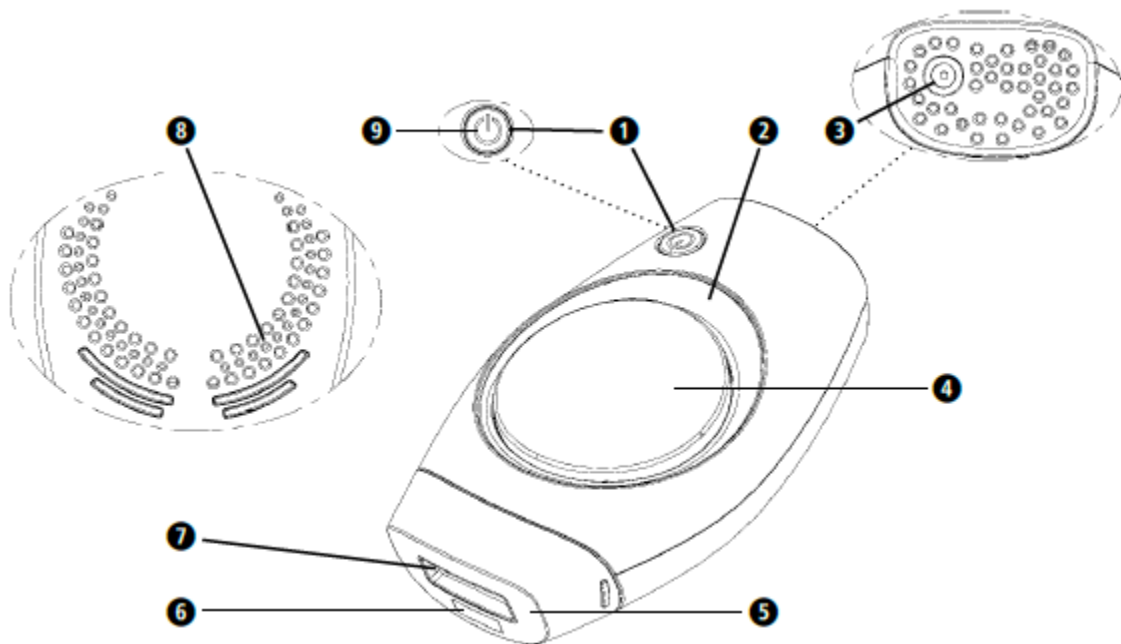

- ❶ Tlačítko ON/OFF a intenzity
- ❷ Displej intenzity (4/6 úrovní)
- ❸ Vstup pro kabel
- ❹ Spouštěcí tlačítko
- ❺ Oblast pro kontakt s pokožkou
- ❻ Senzor pro určení odstínu pokožky
- ❼ Oblast světla s integrovaným UV filtrem
- ❽ Otvory pro ventilaci
- ❾ Indikátor připravenosti

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



DŮLEŽITÉ POKYNY! PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití, a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.

Vysvětlení symbolů



Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.



VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele, příp. poškození přístroje.



Číslo šarže



Výrobce



Chraňte před vlhkem. Skladujte na suchém místě.



Nedívejte se přímo do světla



Pouze pro vnitřní použití



Třída ochrany II



Varování

Hrozí nebezpečí poranění očí nebo pokožky, pokud bezpečnostní pokyny nejsou respektovány. Pozorně si přečtěte následující pokyny a řiďte se nimi. Zabraňte kontaktu očí se světlem z přístroje. Přístroj nepoužívejte na oči víčka ani v okolí očí.

- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením a podle jeho návodu k použití. Při použití v rozporu s určením zaniká nárok na záruku.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte typ pokožky V nebo VIII/IX (zřídka spálený, hodně opálený), nebo ne hodně tmavou pokožku. Dodržujte návod k nastavení intenzity světla!
- Přístroj není vhodný pro bílé nebo šedivé chloupky. V takovém případě, použití zkonzultujte se svým lékařem.
- Nikdy nepoužívejte přístroj po opalování, nebo použití samoopalovacích přípravcích, mohlo by dojít k poškození pokožky. Přístroj použijte minimálně 4 týdne po opalování.
- Po použití přístroje nevystavujte pokožku slunečnímu záření nebo samoopalovacím přípravkům nejméně 2 týdny. Používejte opalovací krémy s UV faktorem alespoň 30.
- U některých lidí může nastat opačný efekt, chloupky můžou růst víc. Konzultujte se svým lékařem.
- V každém případě kontaktujte svého lékaře před použitím přístroje, abyste zjistili, jestli je použití přístroje pro Vás vhodné.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v těhotenství nebo období kojení.
- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte jednou z těchto nemocí:
 - Ekzém, psoriáza, léze, otevřené rány
 - Infekce, jizvy, odřeniny nebo popáleniny
 - Popálení od slunce, zarudnutí, puchýře
 - Diabetes nebo jiná metabolická nemoc
 - Rakovina kůže, zhoubné nádory, epilepsie, poruchy kolagenu, herpes, porucha srážení krve
 - Snížená imunita (např.: HIV/AIDS)
- Pokud máte na pokožce rány, počkejte až do jejich úplného zahojení, než přístroj použijete.
- Přístroj se nesmí používat po ozařování nebo chemoterapii nejméně 3 měsíce.
- Přístroj se rovněž nesmí používat v případě fotosenzitivity nebo jiné citlivosti na světlo (např.: polymorfni světelná dermatóza, alergie na světlo, lupus atd.)
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud užíváte jeden nebo více z těchto léků:
- Léky, které způsobují větší citlivost kůže na světlo, včetně nesteroidních protizánětlivých (např.: aspirin, ibuprofen, paracetamol), Tetracyklin, Fenothiazin, thiazidová diuretika, sulfonfylmočoviny, sulfonamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHAs), beta-hydroxykyseliny (BHAs), Retin-A, Accutane a/nebo tropické retinoidy.
- Rovněž přístroj nepoužívejte:
 - Pokud si léčíte, nebo jste si v minulosti léčili pokožku pomocí alfa-hydroxykyseliny (AHAs), beta-hydroxykyseliny (BHAs), lokálně aplikovali isotretinoin a kyselinu azelaovou.
 - Pokud jste užívali Accutane za posledních 6 měsíců
 - Pokud jste prodělali steroidní léčbu za poslední 3 měsíce
 - Pokud jste si prováděli peeling nebo jiné vyhlazovací metody na pokožce za posledních 8 týdnů
 - Pokud máte aktivní implantáty jako jsou kardiostimulátor, zařízení pro inkontinenci, inzulinová pumpa atd.



Pokud si nejste jisti, že aplikace přístroje je pro Vás vhodná, kontaktujte svého lékaře. Seznam případů, kdy se přístroj nesmí používat není úplný.

- Přístroj smí používat pouze osoby starší 18 let.
- Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla.
- Nikdy přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí jako je vana, sprcha, umyvadlo atd. mohlo by dojít k elektrickému šoku.
- Uchovávejte přístroj mimo vlhké prostředí a nesmí přijít do styku s tekutinou. Mokrý přístroj se nesmí používat.
- Nic do přístroje nevkládejte.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Pokud se na přístroji vyskytne závada, nesnažte se ho opravit. Opravy můžou být provedené pouze autorizovaným servisem.
- Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že výrobek používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost.
- Děti si nesmějí s přístrojem hrát.
- Přístroj lze používat pouze v interiérech. Je určen pouze pro domácí použití, ne pro komerční účely.
- Nikdy přístroj nepoužívejte na tyto části těla:
 - V blízkosti očí nebo na obočí.
 - Prsa (bradavky, dvorce), pochvu, stydké pysky, konečník, sliznice, v nosu a uších
 - U mužů na obličeji nebo šourku
 - Přes náušnice nebo jiné kovové předměty.
 - Na tetování, make-up, bradavice, pihy, tmavé oblasti pokožky atd.
 - Na poškozenou nebo popraskanou pokožku, případně na oblast, která může být poškozena.
 - Na část těla, na které později budete chtít mít chloupky
- Pokud Vám pokožka během aplikace zčervená, nebo se spálí, ihned přestaňte přístroj používat!
- Pokud je oblast pro kontakt s pokožkou ⑤, nebo pokožka sama horká, přestaňte přístroj používat.
- Nikdy se nepokoušejte uvolnit pulz světla do vzduchu. Oblast pro kontakt s pokožkou ⑤ musí být vždy v kontaktu s pokožkou.
- Nikdy nepoužívejte přístroj opakovaně na jedno místo.
- Vyhněte se překrývání světelných pulzů.
- Před použitím přístroje zakryjte oblast těla se znamínky, tetováním, tmavými místy, pihy, bradavicemi atd. látkou.
- Před aplikací nikdy nepoužívejte vznětlivé tekutiny (např.: parfémy, dezinfekční a alkoholové látky, případně aceton pro čištění pokožky)
- Používání přístroje může způsobovat změny pigmentace na pokožce.
- Nikdy přístroj neupravujte nebo nerozdělávejte.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje, pokud upadl do vody. Okamžitě ho odpojte z elektrické sítě a kontaktujte servis.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojený do elektrické sítě.
- Udržujte přívodovou šňůru v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozenou přívodovou šňůru.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud se z něj kouří, nebo pokud nefunguje ventilátor.
- Vždy po použití a před čištěním přístroj vysuňte z elektrické zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte náhradní díly nebo příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte jinou než originální přívodní šňůru.
- Přístroj není vhodný pro použití v blízkosti vznětlivých látek, anestetických směsí, kyslíku nebo rajského plynu.

2. VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Pokud se přístroj používá pro účely, pro které je určený pak jsou vedlejší účinky a komplikace velmi zřídka. Nicméně jakékoliv kosmetické zásahy mohou představovat potenciální riziko. Proto je nezbytné, abyste byli obeznámeni s možným nebezpečím při používání IPL technologie.

- Je možné, že dojde k zarudnutí pokožky po aplikaci IPL, zvýšení citlivosti a celkovému nepohodlí. Tyto reakce jsou většinou neškodné a brzy odezní. Pokud by přetrvaly i po 24 hodinách, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Po aplikaci mohou na pokožce vzniknout malé popáleniny, zjizvení, nebo může dojít ke změně pigmentace, svědění a silnému zarudnutí pokožky. Tyto symptomy by měly odeznít za 2 až 7 dnů. V případě dalších komplikací kontaktujte lékaře.
- V extrémním případě se mohou objevit infekce nebo podlitiny. V takovém případě okamžitě kontaktujte lékaře.
- Zřídka může používání přístroje způsobit modré nebo růžové hematomy, ty přetrvají 5 až 10 dnů. Když hematomy slábnou mohou na pokožce zanechat rezavě hnědé zbarvení (hyperpigmentace) což může být trvalé.
- Zvyšováním světelné intenzity (Ize nastavit od 1 do 4) se na jednu stranu zvýší efektivnost účinku přístroje, ale na druhou stranu se rovněž zvýší riziko vedlejších účinků. Proto vždy začněte používat přístroj s nejnižší intenzitou. Teprve po několika aplikacích, když se neobjeví žádné vedlejší účinky můžete zvýšit intenzitu světla (dle typu Vašich chloupků a pokožky)
- V kombinaci s holením se může vyskytnout svědění nebo suchá pokožka. Tyto symptomy jsou neškodné a odezní během několika hodin.
- Silná bolest během aplikace nebo po ní může nastat v následujících případech:
 - Pokud je pro Váš typ pokožky příliš vysoká intenzita světla
 - Pokud použijete přístroj na neholenou pokožku.
 - Pokud jste aplikovali světelné pulzy opakovaně na to samé místo.
 - Pokud používáte přístroj na otevřené rány, infekci, tetování, popáleniny atd.

3. UŽITEČNÉ INFORMACE

Děkujeme za projevenou důvěru, že jste si zakoupily výrobek MEDISANA. Přístroj **IPL840** je určený pro odstraňování nežádoucích chloupků a snížení jejich opětovnému růstu. Je vhodný jak pro ženy, tak i pro muže. Přístroj je vhodný pro aplikaci na nohy, podpaží, oblast bikin, hrudí, záda, obličej pod lícními kostmi (na obličej pouze pro ženy).

Pro dosažení nejlepších výsledků s přístrojem MEDISANA IPL840 doporučujeme abyste si pozorně přečetli návod k použití.

3.1 Rozsah dodávky a balení

Zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a není poškozený. Pokud máte pochybnosti, přístroj nepoužívejte a kontaktujte dodavatele nebo servis.

Balení obsahuje:

- MEDISANA IPL840
- 1x náplň 100.000 světelných pulsů
- 1x přírodní šňůra
- 1x stručný průvodce
- 1x návod k použití
- 1x úložné pouzdro



Obaly jsou recyklovatelné. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

3.2 Jak IPL840 funguje

IPL technologie vysílá světelné pulzy na pokožku, které pronikají do kořínek chloupků. Tyto světelné impulzy zahřívají chloupky u kořínku a stimulují folikul. Pigment melanin, který se nachází v chloupkách dobře reaguje na světelnou energii, proto hrubé černé chloupky lépe reagují na IPL než jemné blond chloupky. Během ošetření se chloupky uvolní a následní růst se sníží. Chloupky během růstu prochází několika fázemi. Aby byla aplikace optimální, chloupky musí být ve fázi růstu. Jelikož ne všechny chloupky jsou ve stejné fázi růstu, aplikace IPL musí být prováděna opakovaně s určitým odstupem času.

Kompletní růstový cyklus závisí na individuálních faktorech a může v závislosti na typu, chlupatosti a části těla trvat 18-24 měsíců. Trvalé odstranění chloupků je možné jen tehdy, když jsou světelné impulzy aplikované během celé této doby.

Pro Vaši bezpečnost má přístroj zabudovaný senzor kontaktu s pokožkou v oblasti pro kontakt s pokožkou **5**. Senzor umožní uvolnění světelných impulzů jen tehdy, když je přístroj v plném kontaktu s pokožkou. Tím se zabrání uvolnění světelných pulzů do vzduchu.

Přístroj má UV filtr (integrovaný v oblasti světla **7**), tím je pokožka chráněná před škodlivým zářením.

Přístroj má senzor pro určení odstínu pokožky **6** integrovaný v náplni. Senzor zaznamená odstín pokožky pře a během aplikace. Pokud je aplikovaná oblast příliš tmavá, impulzy jsou omezené.

3.3 Intenzita světla

Na přístroji lze nastavit 1-4 úrovně intenzity světla. Začít byste měli s nejnižší úrovní 1. a zkontrolovat, jestli se neobjevili nějaké komplikace (viz bod 4. Provoz). Poté můžete postupně zvyšovat intenzitu (dle barvy vašich chloupků a pokožky). Věnujte pozornost tabulce na konci tohoto návodu. Tabulka obsahuje informace, jaká intenzita světla je nejvhodnější pro Váš typ chloupků a pokožky, nebo jestli je tato metoda odstraňování chloupků vůbec vhodná pro Vás (pokud ne, v tabulce je uveden „X“).

4. UVEDENÍ DO PROVOZU

4.1 Příprava

IPL840 je vhodný pouze pro typy pokožky I až VII. Typ pokožky VIII (tmavší pleť) a rovněž i hodně tmavá pokožka nejsou vhodné k ošetření s tímto přístrojem. Před první aplikací následující body musí být dodrženy:

1. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a možné vedlejší účinky, které jsou popsány v tomto manuálu.
2. Použijte tabulku pro stanovení intenzity světla, která intenzita je pro Vás vhodná (záleží na barvě pokožky a chloupků). „X“ znamená že přístroj není pro Vás vhodný.
3. Pokožka, která má být ošetřena musí být co nejméně bez chloupků. Můžete ji oholit, avšak nepoužívejte depilační krémy.
4. Oblast pokožky pro aplikaci musí být oholená, suchá, čistá a bez krémů, olejů, pudru, make up-u či deodorantů atd.
5. Před prvním použitím IPL840 proveďte na Vaší pokožce test. (viz další bod manuálu)

4.2 Test pokožky

Test pokožky slouží k prověření tolerantnosti aplikace na Vaši pokožku a rovněž k zjištění reakce pokožky na ošetření přístrojem IPL850. Proveďte test nejméně 48 hodin před první aplikací na požadované oblasti.

1. Připojte přístroj k napájecímu kabelu a zástrčku do elektrické sítě. Kontrolka se zeleně rozblíká ⑨
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF ①. Na displeji ② se rozblíká úroveň intenzity světla 1, a automaticky se spustí ventilátor. Přístroj je teď připravený k použití.
3. Přiložte oblast světla s integrovaným UV filtrem ⑦ na pokožku a vyčkejte až kontrolka připravenosti ⑨ přestane blikat a rozsvítí se zeleně. (bliká červeně? Viz bod 5.3)
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF ① na displeji intenzity ② se zobrazí úroveň intenzity světla 1.
5. Stiskněte spouštěcí tlačítko ⑤ k uvolnění pulzu světla s intenzitou 1. Senzory pro kontakt s pokožkou ⑨ musí být v úplném kontaktu s pokožkou, aby přístroj světelný pulz uvolnil. Když přístroj pulz uvolní, uvidíte jasný záblesk a kliknutí.
6. Teď posuňte přístroj na další oblast, mezitím se nabije pro další světelný pulz.
7. Opět stiskněte spouštěcí tlačítko ⑤ k uvolnění pulzu světla na jinou oblast pokožky.
8. Opakujte body 5-7 na všechny oblasti, které máte v plánu ošetřit.
9. Ukončete test k určení tolerantnosti pokožky (vypněte přístroj stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF ①) a počkejte minimálně 48 hodin. Pak zkontrolujte oblasti pokožky, které byly ošetřeny. Pokud se zdají být normální (bez zarudnutí, nebo pouze s lehkým zarudnutím) můžete začít s aplikací na těchto testovaných místech. Pokud se na testované oblasti vyskytnou výrazné zarudnutí, místo je bolestivé, nebo se vyskytnou jiné neobvyklé reakce, nepokračujte s aplikací na tyto oblasti. Kontaktujte svého lékaře.
10. Test opět proveďte, pokud chcete zvýšit intenzitu světla, nebo chcete světlo aplikovat na novou ještě netestovanou oblast pokožky.



VAROVÁNÍ

Nikdy neaplikujte několik světelných pulzů opakovaně na to samé místo!

Pokud se v průběhu aplikace vyskytne bolest, svědění nebo jakákoliv neobvyklá reakce, ihned přístroj přestanete používat a vyhledejte lékaře.

4.3 Plán aplikace

Abyste s přístrojem IPL840 dosáhli optimálních výsledků, je zapotřebí provádět aplikaci opakovaně v několika intervalech během delší doby (18–24 měsíců). Rozlišovat by se měla aplikace na těle a aplikace na obličeji (na obličeji pouze u žen, a to v oblasti pod lícími kosti).

Aplikace na tělo:

- První 3 až 4 aplikace by měly být každá s odstupem 2 týdnů.
- 5. až 7. aplikace – každá s odstupem 4 týdnů
- Od 8. aplikace by se interval měl snížit na 4 až 8 týdnů, dokud nedosáhnete požadované výsledky.

Aplikace na obličej:

- Prvních 6 aplikací by měly být každá s odstupem 2 týdnů.
- 7. až 12. aplikace – každá s odstupem 4 týdnů
- Od 13. aplikace by se interval měl snížit na 4 až 8 týdnů, dokud nedosáhnete požadované výsledky.

Tento plán aplikace doporučujeme pro dosažení co nejlepších výsledků. V závislosti na typu pokožky, barvy chloupků, oblasti aplikace a jiných biologických faktorech se mohou tyto výsledky u různých lidí lišit.

4.4 Aplikace

Ujistěte se, že pokožka, která má být ošetřena je oholená, suchá, čistá a bez krémů, deodorantů atd.

Postupujte dle následujícího:

1. Připojte přístroj k napájecímu kabelu a zástrčku do elektrické sítě. Kontrolka se zeleně rozblíká **9**
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF **1**. Na displeji **2** se rozblíká úroveň intenzity světla 1, a automaticky se spustí ventilátor. Přístroj je teď připravený k použití.
3. Jsou dva způsoby nastavení intenzity světla:
 - a) Intenzitu světla nastavte dle intenzity, kterou jste otestovali a vyhovuje Vám opakovaným stisknutím tlačítka ON/OFF **1** (úroveň 1-4), (1 LED pro úroveň 1, 2 LED pro úroveň 2, 3 LED pro úroveň 3, 4 LED pro úroveň 4)
 - b) Nebo: Přiložte oblast světla s integrovaným UV filtrem **5** na pokožku. Integrovaný senzor pro určení odstínu pokožky **6** automaticky nastaví nejbezpečnější intenzitu světla pro Váš typ pokožky. Kontrolka připravenosti **9** se rozsvítí zeleně a úroveň intenzity se zobrazí pomocí LED vedle spouštěcího tlačítka **4**. Pokud kontrolka **9** pořád bliká, je pokožka pro aplikaci moc tmavá. Pokud je to možné zvolte jinou oblast.

4. Oblast světla s integrovaným UV filtrem ⑦ musí být v úplném kontaktu s pokožkou (kontrolka svítí zeleně), aby přístroj mohl uvolnit světelný pulz. Stiskněte spouštěcí tlačítko ④ k uvolnění pulzu světla. Když přístroj pulz uvolní, uvidíte jasný záblesk a kliknutí.
5. Teď posuňte přístroj na další oblast, mezitím se nabije pro další světelný pulz.
6. Opět stiskněte spouštěcí tlačítko ④ k uvolnění pulzu světla.
7. Opakujte body 5-7 na všechny oblasti, které máte v plánu ošetřit.
8. Vypněte přístroj stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF ①. Kontrolka ⑨ se zeleně rozblíká a ventilátor se zastaví.



VAROVÁNÍ

Nikdy neaplikujte několik světelných pulzů opakovaně na to samé místo!

Pokud se v průběhu aplikace vyskytne bolest, svědění nebo jakákoliv neobvyklá reakce, ihned přístroj přestanete používat a vyhledejte lékaře.

Posouvat přístroj na jinou oblast pokožky můžete dvěma způsoby:

1. Klouzáním

Držte spouštěcí tlačítko ④ stisknuté. Přístroj bude uvolňovat světelné pulzy v řadě, pokud bude oblast světla s integrovaným UV filtrem ⑤ úplně v kontaktu s pokožkou. Po každém pulzu klouznutím přesuňte přístroj na další místo na pokožce. Tento způsob je vhodný pro větší oblasti.

2. Zastavením pulzů

Uvolněte spouštěcí tlačítko ④ po každém pulzu. Před tím, než stisknete spouštěcí tlačítko ④ znovu posuňte přístroj vedle místa, na kterém byl uvolněn pulz. Ujistěte se, že oblast světla ⑦ a oblast pro kontakt s pokožkou ⑤ je úplně v kontaktu s pokožkou. Tento způsob zaručí přesné ošetření míst jako jsou kolena nebo kotníky.



VAROVÁNÍ

Pokud se v přístroji v průběhu aplikace vypne ventilátor, ihned přístroj přestanete používat jinak hrozí nebezpečí popálení z důvodu vysoké teploty. Kontaktujte servis.

Po vypnutí přístroje, vypojte přístroj z elektrické sítě. A kabel odpojte od přístroje, poté vyčistěte přístroj dle instrukcí v bodu 5.1 Čištění a uskladnění.

Přístroj se automaticky vypne po cca 3 minutách. Pro pokračování stiskněte tlačítko ON/OFF ① a zvolte požadovanou intenzitu.

4.5 Instrukce k použití na obličejí

Přístroj se nesmí používat na obličejí mužů a u žen pouze pod lícními kosti. Nepoužívejte přístroj na sliznice v uchu nebo v nose. Jelikož je pokožka na tváři velmi citlivá, doporučujeme používat maximální intenzitu č.2. Při aplikaci pulzů v oblasti horního rtu, tváři, čelistí, nebo krku dejte maximální pozor. Mohli byste pohnout rty. V případě potřeby můžete na rty nanést bílé oční linky, což způsobí, že světelný puls se odrazí a nezasáhne vaše rty, pokud je náhodou pulzem zasáhnete.

4.6 Péče po aplikaci

Po ošetření přístrojem může být pokožka lehce zarudlá, může svědit ne mít pocit tepla. Tyto příznaky jsou zcela neškodné a odezní v krátké době. Nicméně můžete pomoci pokožce, aby se regenerace po aplikaci urychlila. Na pokožku můžete nanést zklidňující, hydratační mléko bez parfému např. Aloe vera. Pokožku můžete také zchladit na několik minut vlhkým ručníkem nebo ledovým polštářem. V nejbližších 48 hodinách se vyhněte peelingovým prostředkům, bělícím krémům, deodorantům, přímému slunečnímu záření, samoopalovacím krémům atd. Po této době (48h) používejte opalovací krém s ochranným faktorem 30, pokud se bude zdržovat na slunci minimálně 2 týdny po aplikaci. Neodstraňujte chloupky voskem.

5. RŮZNÉ

5.1 Čištění a uskladnění

Přístroj se musí po každém použití vyčistit. Nepoužívejte agresivní čisticí látky, tvrdé kartáče, aby se povrch přístroje nepoškodil. Nikdy neponořujte přístroj nebo jeho části do vody a nikdy je neoplachujte pod tekoucí vodou.

Pro správné čištění dodržujte tyto zásady:

- Přístroj musí být odpojený z elektrické sítě.
- Očistěte povrch přístroje s čistým, suchým hadříkem, který nepouští chloupky.
- Navlhčete jemný hadřík, který nepouští chloupky s pár kapkami vody a důkladně očistěte oblast pro kontakt s pokožkou ⑤ a oblast světla ⑦
- Uskladněte přístroj na suchém bezprašném místě, ideálně v originálním balení dle podmínek pro uskladnění uvedených v bodu 5.5 „Specifikace“.

5.2 Výměna náplně

V balení se nachází 1 náplň se životností 100.000 světelných impulzů. V případě standardního používání přístroje v souladu s tímto návodem k použití, jedna náplň by měla vydržet pro jednoho uživatele několik let. Pokud se na náplni objeví skvrny, nevycházejí žádné případně slabé světelné pulzy, nebo je náplň prasklá, je nutné ji vyměnit. Vyndejte náplň zatáhnutím a vložte novou.

5.3 Chybové hlášení

Možné příčiny a řešení. Pokud Vám tyto řešení nepomůžou kontaktujte servis.

Problém: Přístroj nelze zapnout.

Řešení: Ujistěte se, že je kabel s konektorem zapojený do přístroje a zástrčka v elektrické zásuvce. Stiskněte tlačítko ON/OFF ①.

Problém: Z přístroje nevychází světelné pulzy po stisknutí spouštěcího tlačítka ④.

Řešení: Indikátor připravenosti ⑨ by měl svítit zeleně před stisknutím spouštěcího tlačítka ④. To se děje pouze tehdy, pokud je kontakt pokožky s přístrojem (oblastí pro kontakt s pokožkou ⑤) dostatečný. Pokud Indikátor připravenosti ⑨ bliká červeně, odstín pokožky je příliš tmavý.

Problém: Kontakt pokožky s přístrojem (oblastí pro kontakt s pokožkou ⑤) je dostatečný a typ pokožky I až VII rovněž, ale indikátor připravenosti ⑨ stále nesvítí zeleně a není možné uvolnit světelný pulz.

Řešení: Pokud indikátor připravenosti ⑨ bliká nebo je barva indikátoru jiná, mohlo dojít k systémové chybě. Vypněte přístroj, a odpojte ho z elektrické sítě. Asi po minutě opět zapojte kabel do elektrické sítě a přístroj zapněte. Pokud přístroj nadále nefunguje, kontaktujte servis.

5.4 Likvidace přístroje



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu se životním prostředím. obraťte se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.

5.5 Specifikace

Název a model:	MEDISANA depilační systém IPL840
Zdroj napájení:	100-240V~ 50/60Hz 1A
Adaptér:	SW24C-12002000-EU
Technologie:	IPL (intenzivní pulzní světlo pro domácí použití)
Max. energ. úroveň:	max. 5 joules/cm ²
Oblast světla:	2,7 cm ²
Vlnová délka:	475 - 1200 nm
Intenzity světla:	4 úrovně (6 v automatickém módu)
Délka pulzu:	6400 - 7600 µsec
Provozní podmínky:	+10°C až +35°C; Vlhkost: 3 % až 75 %; Tlak:700 až 1060 hPa
Skladovací podmínky:	-35°C až +70°C; Vlhkost: 10 % až 90 %; Tlak:500 až 1060 hPa
Rozměry:	cca 13,8 x 8 x 4,5 cm
Hmotnost:	cca 205g
Číslo výrobku:	88585
EAN:	4015588 88585 3
Příslušenství:	Náhradní náplň (kapacita: cca 100.000 světelných pulzů) – 88586, EAN 4015588 88586 0

V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a změny tvaru.

6. ZÁRUKA

6.1 Záruka a záruční opravy

Obraťte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

- 1.** Na tento výrobek poskytujeme 2letou záruku od data zakoupení. V případě reklamace je nutné doložit doklad o zakoupení.
- 2.** Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
- 3.** Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
- 4.** Ze záruky jsou vyloučené:
 - a.** veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
 - b.** Závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
 - c.** závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
 - d.** součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení (baterie, odběrové pero, a příslušenství pro jedno použití apod.).
- 5.** Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.

6.2 Servis

BONITO CZ s.r.o.
Pod Pekařkou 1/107
147 00 Praha 4 – Podolí
info@bonito.cz