



## Masážní křeslo

**RC420**

## NÁVOD K POUŽITÍ

Max. 150 kg


Art: 88412



## Popis produktu

- ① Opěradlo
- ② Područky
- ③ Kabel
- ④ Ovladač
- ⑤ Kapsa pro ovladač
- ⑥ Sedací oblast

<b>1 Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Užitečné informace .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Použití .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Různé .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Záruka a servis .....</b>	<b>9</b>

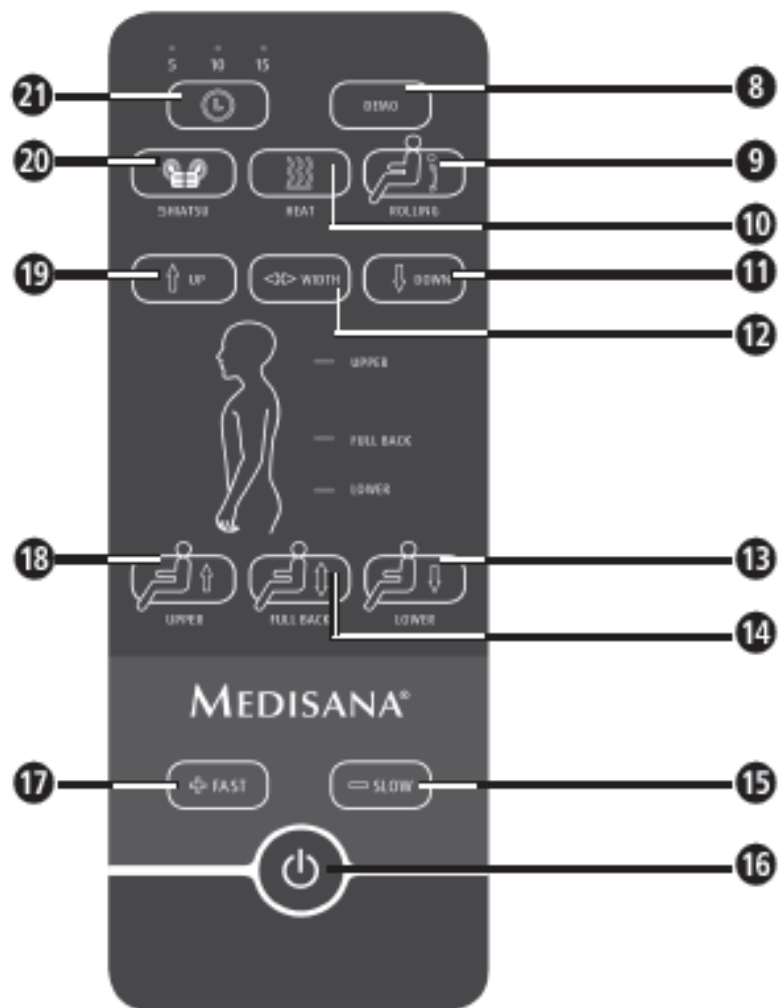

- 8 DEMO tlačítko (všechny masážní funkce)
- 9 ROLLING tlačítko (rolovací masáž)
- 10 HEAT tlačítko tepla (spouští a vypíná funkci tepla)
- 11 DOWN tlačítko (posouvá masážní hlavy směrem dolů během shiatsu masáže)
- 12 WIDTH tlačítko (nastavení šíře masážních hlav během rolovací masáže)
- 13 LOWER tlačítko s LED (spouští a vypíná shiatsu masáž v dolní části zad)
- 14 FULL BACK tlačítko s LED (spouští a vypíná shiatsu masáž v celé délce zad)
- 15 - SLOW tlačítko (pro snížení rychlosti masáže)
- 16 ON/OFF tlačítko (pro zapnutí a vypnutí)
- 17 + FAST tlačítko (pro zvýšení rychlosti masáže)
- 18 UPPER tlačítko s LED (spouští a vypíná shiatsu masáž v horní části zad)
- 19 UP tlačítko (posouvá masážní hlavy směrem nahoru během shiatsu masáže)
- 20 SHIATSU tlačítko (Shiatsu masáž)
- 21 Tlačítko časování (5/10/15 minut)

## 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



### DŮLEŽITÉ POKYNY!

#### PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití, a především bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití.

#### Význam symbolů



Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo k poškození přístroje.



#### VAROVÁNÍ

Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu uživatele.

**LOT** číslo šarže



Výrobce



Zamezte vlhkosti! Udržujte v suchu!



Používejte pouze v uzavřených prostorech!



Třída ochrany II



POZOR

Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje.



UPOZORNĚNÍ

Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo provozu.

## Napájení elektrickým proudem

- Dříve, než přístroj zapojíte do sítě zkontrolujte, zda je elektrické napětí uvedené na typovém štítku shodné se síťovým napětím.
- Nikdy nepoužívejte jinou šňůru než originální.
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky pouze tehdy, pokud je přístroj vypnutý.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vysokofrekvenčních elektromagnetických vysílačů.
- Udržujte síťový kabel a přístroj mimo tepelné zdroje, horké povrchy, vlhko a kapaliny.
- Nedotýkejte se síťové zásuvky nebo síťové zástrčky nikdy mokřýma, popřípadě vlhkýma rukama nebo pokud stojíte ve vodě.
- Části přístroje, které vodí elektrické napětí, se nesmí dostat do kontaktu s kapalinou.
- Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Vytáhněte ihned síťovou zástrčku.
- Přístroj musí být připojen tak, aby byla síťová zástrčka volně přístupná.
- Po použití vytáhněte vždy ihned síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- Pokud chcete přístroj vypnout z elektrické sítě, netahejte nikdy za síťový kabel, ale vždy za síťovou zástrčku!
- Nenoste, netahejte nebo neotáčejte přístroj za síťový kabel.

## Před prvním použitím výrobku

- Zkontrolujte pečlivě před každým použitím, zda není kabel, ovládací přístroj nebo židle poškozena. Vadný přístroj se nesmí uvést do provozu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na přístroji nebo kabelech viditelná poškození, pokud přístroj nefunguje bez závad, pokud křeslo nebo ovládací přístroj navlhli.
- Pokud je kabel poškozený, může být vyměněný pouze u autorizovaného servisu.

## Provozování přístroje

- Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením podle návodu k obsluze. Při použití k jinému účelu zaniká nárok na záruku.
- Nenechte přístroj bez dohledu, pokud je připojen k elektrické síti.
- Vyvarujte se kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.
- Nepokládejte a nepoužívejte přístroj nikdy přímo vedle elektrických kamen nebo jiných zdrojů tepla.
- Nestavte se na přístroj.
- Používejte přístroj pouze v prostorných místnostech s dostatečnou ventilací.
- Nepoužívejte masážní funkci déle než 15 minut. Příliš dlouhá masáž může způsobit nadměrnou stimulaci a podráždění nervu.
- Ověřte před každým použitím, správnost utažení šroubů.



**Nehýbejte se na křesle, pokud je kabel v elektrické síti. Může dojít k poškození kabelu.**



**Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti, a ne pro komerční účely nebo použití ve zdravotnictví. Pokud máte pochybnosti, poraďte se před použitím masážní podušky se svým lékařem.**



**Nepoužívejte masážní křeslo ve vlhkých místnostech (např. při koupání nebo sprchování).**

- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, okamžitě vypojte přístroj z elektrické sítě:
  - pokud se vyskytne závada během používání
  - po každém použití
  - před každým čištěním

## Údržba a čištění

- Přístroj je bezúdržbový.
- V případě poruchy přístroj neopravujte sami. Zanikl by tak nejen jakýkoli nárok vyplývající ze záruky, ale mohou také nastat vážná nebezpečí (požár, zásah elektrickým proudem, úraz). Opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisu.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

## Pro zvláštní osoby

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 14 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte tento přístroj jako pomůcku nebo nahrazení lékařských aplikací. Chronické potíže a příznaky by se mohly ještě zhoršit.
- Neaplikujte masáž na oblasti, na kterých jsou otoky, popáleniny, vyrážky, jizvy nebo jiná citlivá místa.
- Neaplikujte masáž v následujících případech, nebo její použití nejprve konzultujte s lékařem:
  - Těhotenství
  - Používáte kardiostimulátor, máte voperovány umělé klouby nebo elektronické implantáty

- Trpíte některou z uvedených chorob, zdravotním problémem nebo jejich kombinacemi: Poruchy prokrvení, křečové žíly, otevřené rány, pohmožděniny, poranění kůže, zánět žil.
- Přístroj má horký povrch. Osoby, které jsou necitlivé na vnímání tepla, musejí být při používání výrobku opatrné.
- Pokud cítíte bolesti nebo pokud je vám masáž nepříjemná, přerušte aplikaci a promluvte si s lékařem.



## **VAROVÁNÍ**

**Nebezpečí převrácení – Nepřetěžujte jednu stranu křesla na područce nebo opěradle. Nikdy nenechte děti hrát si s křeslem bez dozoru.**

## 2. UŽITEČNÉ INFORMACE

Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru a srdečně blahopřejeme!  
Koupí **masážního křesla RC420** jste získali kvalitní výrobek značky **MEDISANA**. Abyste dosáhli kýženého úspěchu a mohli se ze svého Medisana masážního křesla RC420 těšit opravdu dlouhou dobu, doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli následující pokyny pro použití a údržbu.

### 2.1 Rozsah dodávky a obal

Zkontrolujte nejprve, zda je přístroj kompletní a není poškozený. Pokud máte pochybnosti, přístroj nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo jeho servis.

K rozsahu dodávky patří:

- 1x Medisana masážní křeslo RC420
- 1x Nabíjecí kabel
- 1x Návod k sestavení a použití



Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin. Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned svého prodejce.



### UPOZORNĚNÍ

Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí. Hrozí nebezpečí udušení!



**POZOR!** Dejte pozor abyste důkladně utáhli všechny šrouby z návodu pro sestavení!

## 3. POUŽITÍ

Masážní křeslo má tři funkce:

Prstovou masáž (Shiatsu masáž), rolovací masáž a vyhřívání. Vyhřívací funkce může být aktivována pouze s masáží. Neaplikujte masáž déle, než 15 minut. Po cca 15 minutách se masáž automaticky vypne. Vždy nechte křeslo po použití vychladnout, než ho opět použijte.

- 1) Připojte masážní křeslo k napájecímu kabelu a zástrčku do elektrické sítě. Ujistěte se, že je kabel snadno dostupný.
- 2) Sedněte si na křeslo **6** a seznamte se s funkcemi.
- 3) Zapněte křeslo stisknutím ON/OFF tlačítka **16**

### Vypnutí

Stiskněte tlačítko ON/OFF **16**. LED kontrolka začne blikat a masážní hlavy se vrátí do výchozí polohy. Poté LED kontrolka zhasne.

### 3.1 Funkce

#### DEMO tlačítko **8**

Stiskněte DEMO tlačítko a křeslo automaticky začne s ukázkami různých masážních funkcí. LED kontrolky ukazují aktuální polohu masážních hlav a jednotlivou funkci. Demo verze zastaví jakmile skončí všechny demo verze masáží.

#### HEAT tlačítko **10**

Stiskněte tlačítko HEAT pro aktivaci vyhřívací funkce. Na ovládači se rozsvítí LED kontrolka a masážní hlavy se rozsvítí červeně. Opětovným stisknutím tlačítka se funkce vyhřívání vypne. Kontrolka na ovládači a červené světlo na masážních hlavách vypne.

## Shiatsu masáž 20

### LOWER tlačítko (spodní část zad) 13

Shiatsu masážní hlavy jezdí nahoru a dolů ve spodní části zad v krouživém pohybu. Jakmile hlavy dosáhnou konec oblasti začnou masážní hlavy kroužit v opačném směru.

### UPPER tlačítko (horní část zad) 18

Shiatsu masážní hlavy jezdí nahoru a dolů v horní části zad v krouživém pohybu. Jakmile hlavy dosáhnou konec oblasti začnou masážní hlavy kroužit v opačném směru.

### FULL tlačítko (celá záda) 14

Shiatsu masážní hlavy jezdí se shora dolů po celé části zad v krouživém pohybu. Jakmile hlavy dosáhnou nejspodnější část, hlavy začnou jezdit směrem nahoru. Když masážní hlavy dosáhnou opět nejvyšší pozice začnou kroužit v opačném směru.

## Rolovací masáž 9

V závislost na Vaší volbě, masážní hlavy se pohybují podél zad v horní části (UPPER tlačítko 18), spodní části (LOWER tlačítko 13), nebo po celých zádech (FULL tlačítko 14). Na rozdíl od Shiatsu masáže masážní hlavy nerotují. Tlačítkem WIDTH 12 nastavíte šíři masážních hlav během masáže.

**Opakovaným stisknutím tlačítka 20 / 9 f funkci masáže vypnete.**

### FAST / SLOW tlačítko 17 15

Těmito tlačítky můžete nastavit rychlost masáže. FAST (+) a SLOW (-)

### TIMER tlačítko 21

S tímto tlačítkem nastavíte délku masáže. Stiskněte tlačítko 21, tlačítko se rozsvítí a nastaví délku masáže na 5 minut (rozsvítí se LED „5“).

Opakovaným stisknutím se nastaví délka masáže na 10 minut (rozsvítí se LED „10“). Dalším stisknutím se nastaví délka masáže na 15 minut (rozsvítí se LED „15“)

## 4. RŮZNÉ

### 4.1 Čištění a péče

- Dříve než začnete s čištěním přístroje, přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a že je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky. Nechte přístroj vychladnout.
- Masážní Shiatsu křeslo čistěte pouze měkkým hadříkem, který lehce navlhčíte jemným mýdlovým přípravkem.
- V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, silné kartáče, rozpouštědla nebo alkohol.
- Nikdy přístroj neponořujte pro čištění do vody a dbejte na to, aby do přístroje nepronikla voda.
- Přístroj použijte teprve tehdy, až je zcela vysušený.
- Rozmotejte kabel, pokud je překroucený.


### 4.2 Likvidace



Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje zlikvidovány v souladu s životním prostředím. Obratě se v případě likvidace na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce.



## 4.3 Technická specifikace

Název a model:	MEDISANA Masážní Křeslo RC420
Napájení el. proudem:	Síťový adaptér Typ: YJS060D-1203500G 100-240V ~ 50/60 Hz, 1500mA 12V  3,5A
Příkon:	42W
Rozměry:	cca 70 x 67 x 103cm
Hmotnost:	cca 15kg
Max. nosnost:	150kg
Číslo výrobku:	88412
Číslo EAN:	40 15588 88412 2

V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a změny tvaru.

## 5. ZÁRUKA

Obraťte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi.

Platí přitom následující záruční podmínky:

1. Na výrobky **MEDISANA** se poskytuje záruka tři roky od data prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat stvrzenkou o koupi nebo fakturou.
2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují během záruční lhůty zdarma.
3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro přístroj ani pro vyměněné komponenty.
4. Ze záruky jsou vyloučené:
  - a. veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. nedodržováním návodu k použití.
  - b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo neoprávněnou třetí osobou.
  - c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli nebo při zaslání do servisu.
  - d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na přístroji uznána jako případ záruky.

## SERVIS

BONITO CZ s.r.o.

Pod Pekařkou 1/107

147 00 Praha 4 – Podolí

Info@bonito.cz